




Orion C&G RIC

Naudotojo vadovas

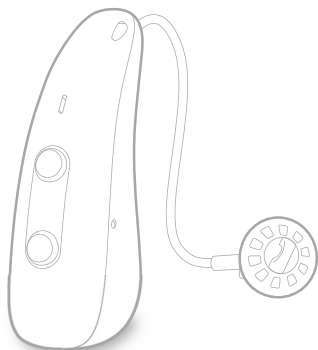

Turinys

Sveiki!	4
<hr/>	
Jūsų klausos aparatai	5
<hr/>	
Klausos aparato tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	5
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	6
Valdikliai	8
Klausos programos	9
Funkcijos	9
Kasdienis naudojimas	10
<hr/>	
Įkrovimas	10
Įjungimas ir išjungimas	12
Budėjimo režimo įjungimas	13
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	14
Garsumo reguliavimas	18
Klausos programos keitimas	19
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	19
Ypatingos klausymosi sąlygos	20
<hr/>	
Kalbant telefonu	20
Techninė priežiūra ir aptarnavimas	21
<hr/>	
Klausos aparatai	21
Į ausį kišamos dalys	23
Specialistų atliekama techninė priežiūra	25

Svarbi informacija apie saugą	26
Tolesnė informacija	29
Informacija saugos klausimais	29
Priedai	29
Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos	29
Informacija apie prietaiso likvidavimą	31
Šiame dokumente naudojami simboliai	31
Trikčių diagnostika	32
Su šalimi susijusi informacija	33
Techninė priežiūra ir garantija	35

Sveiki!

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos priežiūros specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prieš pirmą kartą naudodami klausos aparatus, juos visiškai įkraukite. Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

Jūsų klausos aparatai

i

Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

Klausos aparato tipas

Jūsų klausos aparatai yra su RIC (Receiver-in-Canal) imtuvu. Imtuvas yra įdedamas į ausies kanalą ir sujungiamas su klausos aparatu imtuvo laidu. Klausos aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Į klausos aparatą yra įmontuotas neišimamas maitinimo elementas (įkraunama ličio jonų baterija). Dėl to paprasta įkrauti naudojant mūsų Multi Charger.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologines funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.


Susipažinimas su klausos aparatu

Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami klausos aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir įsidėmėkite, kurioje klausos aparato vietoje jie yra. Tada, nešiodami klausos aparatą, galėsite lengviau apčiuopti ir paspausti valdiklius.

i


Jeigu įsidėjus klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, galite pasiteirauti klausos specialisto, ar klausos aparatą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle.

Sudedamosios dalys ir pavadinimai

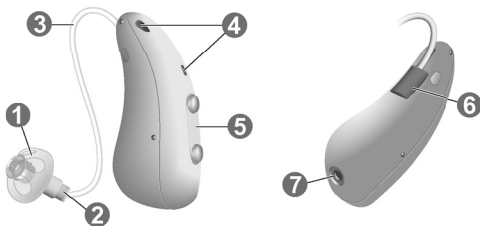



-
- | | |
|-----------------------|--|
| 1 ausį kišama dalis | 5 Klavišinis jungiklis
(valdymas, įjungimo /
išjungimo jungiklis) |
| 2 Imtuvas | |
| 3 Imtuvo kabelis | 6 Pusės indikatorius
(raudonas = dešinioji ausis,
mėlynas = kairioji ausis) ir
imtuvo jungtis |
| 4 Mikrofono angos | |
| | 7 Įkrovimo kontaktas |
-

Galite naudoti toliau išvardytas standartines į ausį kišamas dalis:

Standartinės į ausį kišamos dalys		Dydis
<input type="radio"/>		Click Sleeve (pralaidžiojo arba uždarojo tipo)
<input type="radio"/>		Click Dome™ viengubas (atvirojo arba uždarojo tipo)
<input type="radio"/>		Click Dome pusiau atviras
<input type="radio"/>		Click Dome dvigubas

Standartinės į ausį kišamas dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys

<input type="radio"/>		Pritaikytasis įdėklas
<input type="radio"/>		Click Mold™

Valdikliai

Naudodami klavišinį jungiklį galite, pvz., perjungti klausymosi programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.

Klavišinio jungiklio funkcijos	L	R
Paspauskite trumpai:		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes.		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laikykite paspaudę ilgiau nei 3 sekundes:		
Ijungimas / išjungimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = į kairę, R = į dešinę



Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį girdėjimo programoms keisti ir klausos aparato garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

Klausos programos

1

2

3

4

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

Funkcijos

- Ūžesio terapijos funkcija** sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.

Kasdienis naudojimas

Kad klausos aparatais būtų patogų ir paprasta naudotis, jie turi integruotą valdymo elementą.

Be to, siūlome „Android“ ir „iPhone“ programėles, kuri leidžia dar lengviau valdyti įrenginius. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti išmaniojo telefono programėlę, kreipkitės į savo klausos specialistą.

Įkrovimas

Savo klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

- ▶ Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais. Įkroviklio naudotojo vadove taip pat galite rasti naudingų krovimo patarimų.



Pranešimas apie mažą energijos kiekį

Girdėsite įspėjamąjį signalą, nurodantį, kad maitinimo elementas baigia išsieikvoti. Signalas bus kartojamas kas 15–30 minučių, atsižvelgiant į jūsų nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kaip naudojate klausos aparatus, jiems įkrauti turite maždaug 1,5 val. – po to jie nustos veikti.

Turėkite omenyje, kad maitinimo elementas veikia trumpiau, jei vienu metu naudojama daug funkcijų.

Krovimo patarimai

Jums gali kilti klausimų, kaip geriausia krauti klausos aparatus. Perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir atsakymus. Jei turite daugiau klausimų, jums padės klausos priežiūros specialistas.



Kaip dažnai reikia krauti klausos aparatus?

Rekomenduojame klausos aparatus krauti kasdien, net jei maitinimo elementas nėra išsikrovęs. Juos kraukite per naktį – tada dieną tikrai pradėsite su visiškai įkrautais klausos aparatais.



Kiek laiko trunka krovimas?

Visiško įkrovimo ciklas trunka maždaug 4 valandas.

Po 30 minučių klausos aparatus galima naudoti iki 6 valandų.

Įkrovimo trukmė gali skirtis dėl klausos aparatų naudojimo ir maitinimo elemento amžiaus.



Kas nutinka, jei pamirštama įkrauti?

Kai išsikrauna maitinimo elementas, klausos aparatai automatiškai išsijungia. Kuo greičiau įkraukite klausos aparatus.

Daugiau nei 6 mėnesius nekrauti klausos aparatai gali sugesti dėl nepataisomo per didelio maitinimo elemento iškrovimo. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų įkrauti nebegalima ir juos reikia pakeisti.

Ijungimas ir išjungimas

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Įkrovikliu:

- ▶ Įjungimas: išimkite klausos aparatus iš įkroviklio.
Jūsų klausos aparate leidžiama paleidimo melodija.
Nustatomas **numatytasis** garsumas ir girdėjimo programa.
- ▶ Išjungimas: klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

Atminkite, kad įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Daugiau informacijos rasite įkroviklio naudotojo vadove.

Naudojant klavišinį jungiklį:

- ▶ Įjungimas: Nuspaudę laikykite klavišinio jungiklio apatinę dalį, kol pradės groti paleidimo melodija. Kol melodija groja, atleiskite klavišinį jungiklį.

Nustatomas **numatytasis** garsumas ir girdėjimo programa.

- ▶ Išjungimas: Kelias sekundes palaikykite nuspaustą apatinę klavišinio jungiklio dalį, kol klausos aparatas išsijungs.



Taip pat žr. įkroviklio naudotojo vadove pateiktus krovimo patarimus.

Budėjimo režimo įjungimas

Nuotolinio valdymo pulteliu klausos aparatus galite perjungti į budėjimo režimą. Taip klausos aparatai nutildomi. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir girdėjimo programa.

Pastaba:

- Veikiant budėjimo režimui, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungti. Jie vartoja šiek tiek energijos.
Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.
- Jei norite išeiti iš budėjimo režimo, bet nuotolinio valdymo pultelio neturite po ranka: Klausos aparatus išjunkite ir vėl įjunkite (klavišiniu jungikliu arba trumpam įdėdami į įkroviklį, kol pradės šviesti viena ar daugiau LED lempučių). Tokiu atveju nustatomas **numatytasis** garsumas ir girdėjimo programa.

Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.




Klausos aparato įdėjimas:

- ▶ Naudodami Click Sleeves pasirūpinkite, kad Click Sleeve sulenkimas sutaptų su imtuvo laido sulenkimu.


Teisingai:

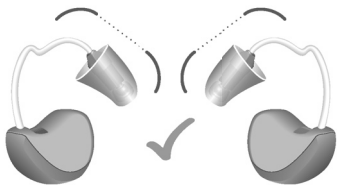

Neteisingai:

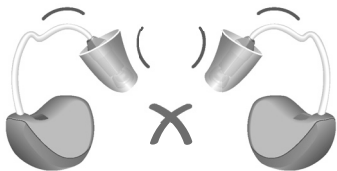

- ▶ Laikykite imtuvo laidą už linkio arčiau į ausį kišamos dalies.
- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ❶.
- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.
Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.
- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkeltkite virš viršutinės ausies dalies ❷.

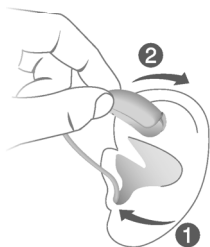

PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.



- Gali būti patogiau **dešinijį** klausos aparatą dėti **dešiniaja** ranka, o **kairijį** – **kairiaja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.



PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Imtuvo laidā visada naudokite su ausies antgaliu.
- ▶ Įsitinkinkite, kad į ausį kišama dalis yra gerai pritvirtinta.


Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ▶ Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlyje).



Klausos aparato išėmimas:

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ①.
- ▶ Jeigu naudojate klausos aparatą su pritaikytu įdėklu arba Click Mold, jį arba ją išimkite traukdami link pakaušio už mažo išimti skirto laidelio.
- ▶ Naudodami bet kokias kitas į ausį kišamas dalis: Ausies kanale esantį imtuvą suimkite dviem pirštais ir atsargiai ištraukite ②.

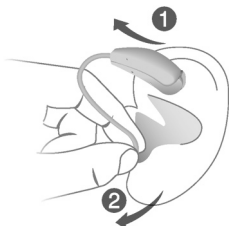

Netraukite imtuvo laido.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

Garsumo reguliavimas

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- ▶ Jei norite reguliuoti garsą patys, paspauskite viršutinę klavišinio jungiklio dalį, kad pagarsintumėte, arba apatinę, kad patylintumėte.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

Klausos programos keitimas

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- ▶ Jei norite pakeisti klausos programą, trumpai paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)

Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio terapijos signalui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

Ypatingos klausymosi sąlygos

Kalbant telefonu

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



Kalbėjimo telefonu programa

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukongigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- ▶ Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukongigūruota kalbėjimo telefonu programa.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

Klausos aparatai

Valymas

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniu ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Nevalykite įkrovimo kontaktų alkoholio pagrindo skiedikliu.
- ▶ Kad išvengtumėte korozijos naudokite minkštą ir sausą servetėlę prakaitui ar skysčiui nušluostyti nuo įkrovimo kontaktų arba klausos aparatų prieš įstatydami juos į įkroviklį.
- ▶ Kreipkitės į klausos specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiosios priežiūros rinkinių arba paieškokite išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti tinkamą klausos aparatų būklę.



Džiovinimas

Dėl rekomenduojamų džiovinimo produktų ir asmeninių nurodymų, kada džiovininti klausos aparatus, kreipkitės į savo klausos specialistą.

Laikymas

- Trumpalaikis laikymas nenaudojant (iki kelių dienų). Klausos aparatus išjunkite klavišiniu jungikliu arba įdėkite juos į įkroviklį, į kurį tiekama elektros energija. Įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jei įkroviklis prie maitinimo šaltinio neprijungtas ir į jį įdedate klausos aparatus, jie **neišjungiami**.

Atkreipkite dėmesį, kad kai klausos aparatus išjungiame nuotolinio valdymo pulteliu ar išmaniojo telefono programėle, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungiami. Jie veikia budėjimo režimu ir vis dar vartoja šiek tiek energijos.

- Ilgalaikis laikymas nenaudojant (savaites, mėnesius ir t. t.). Pirmiausia savo klausos aparatus visiškai įkraukite. Prieš palikdami nenaudojamą, išjunkite jį klavišiniu jungikliu. Jei klausos aparatai yra nenaudojami ir laikomi, rekomenduojame naudoti džiovinimo produktus.

Kas 6 mėnesius klausos aparatus reikia įkrauti, kad nepataisomai per daug neišsikrautų maitinimo elementas. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų krauti nebegalima ir juos reikia pakeisti. Krauti rekomenduojame dažniau nei kas 6 mėnesius.

Laikykitės laikymo sąlygų, nurodytų skyriuje „Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.

Į ausį kišamos dalys


Valymas

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Naudodami bet kokio tipo į ausį kišamas dalis:

- ▶ Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.

Taip ausų siera neprisidžius.

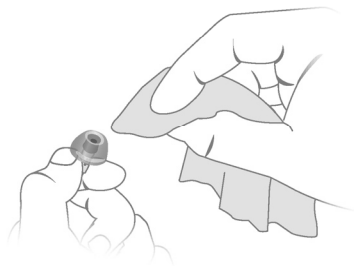

Click Domes arba Click Sleeves:

- ▶ Suspauskite į ausį kišamos dalies galiuką, kad pašalintumėte ausų sierą.




Keitimas


Standartines į ausį kišamas dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau. Standartinių į ausį kišamų dalių keitimo procedūra priklauso nuo į ausį kišamos dalies tipo. Skyriuje „Sudedamosios dalys ir pavadinimai“ jūsų klausos specialistas pažymėjo jūsų naudojamą į ausį kišamos dalies tipą.

Click Domes keitimas

- ▶ Norėdami išimti seną Click Dome, vadovaukitės Click Domes pakuotės instrukcijomis. Saugokitės, kad netrauktumėte imtuvo laido.

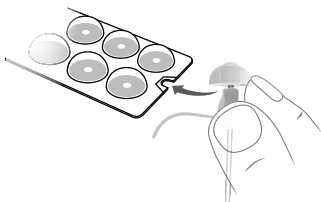


- ▶ Pasirūpinkite, kad naujasis Click Dome tikrai užsifikuotų reikiamoje padėtyje.
- ▶ Patikrinkite, ar naujasis Click Dome tvirtai užsifiksavo.

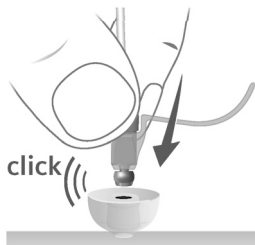

Click Sleeves keitimas

- ▶ Išverskite Click Sleeve į išorę.
- ▶ Suimkite Click Sleeve ir imtuvą (ne imtuvo kabelį) pirštais ir numaukite Click Sleeve.
- ▶ Pasirūpinkite, kad naujasis Click Sleeve tikrai užsifikuotų reikiamoje padėtyje.

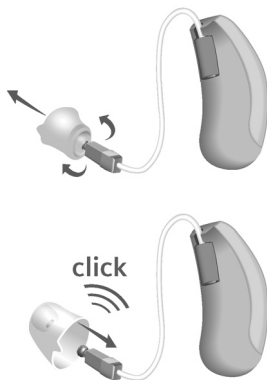

Specialistų atliekama techninė priežiūra

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prireikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

Svarbi informacija apie saugą

Šiame skyriuje pateikiama svarbi saugos informacija, susijusi su maitinimo elementu. Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su klausos aparatais pridedamą saugos instrukciją.



ĮSPĖJIMAS

Į jūsų prietaisą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Netinkamai naudojant prietaisą, įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas gali sprogti.

Sužeidimo, gaisro arba sproginimo pavojus!

- ▶ Laikykitės šiame skyriuje pateiktų įkraunamų ličio jonų maitinimo elementų saugos nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Prijunkite įkroviklį naudodami tik USB maitinimo šaltinį, atitinkantį IEC 62368-1.



ĮSPĖJIMAS

- ▶ Laikykitės naudojimo sąlygų.
- ▶ Būkite itin atidūs ir prietaisą saugokite nuo didelio karščio (pvz., ugnies, mikrobangų krosnelės, indukcinės orkaitės ir kitų didelės indukcijos laukų) bei saulės šviesos.
- ▶ Klausos aparatus kraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į klausos specialistą.
- ▶ Prietaiso neardykite.
- ▶ Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje.
- ▶ Nenaudokite deformuotų ar aiškiai pažeistų prietaisų.
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jo veikimas po krovimo labai suprastėja. Grąžinkite prietaisą klausos specialistui.
- ▶ Neišmeskite prietaiso į ugnį arba vandenį.



ĮSPĖJIMAS

Keitimo ir remonto darbus turi atlikti specialistas.
Todėl:

- ▶ Neremontuokite ir nekeiskite įkraunamo ličio jonų maitinimo elemento patys.
- ▶ Kadangi mažai tikėtina atveju įkraunama ličio jonų baterija gali trūkti arba sprogti, visas degias medžiagas laikykite atokiau.

Visais pirmiau paminėtais atvejais grąžinkite prietaisus klausos priežiūros specialistui.

Tolesnė informacija

Informacija saugos klausimais

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

Priedai

Galite naudoti išmanųjį telefoną, kad valdytumėte klausos aparatus nuotoliniu būdu (tai galima daugelyje šalių). Ši programėlė teikia galimybę reguliuoti klausos aparatus iš išmaniojo telefono ir netgi individualiai pritaikyti girdėjimo ypatybes.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos specialistą.

Eksplotavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos

Klausos aparatai veikia toliau nurodytomis aplinkos sąlygomis (taip pat galioja tarp naudojimo ciklų).

Eksplotavimo sąlygos	Iškrovimas	Įkrovimas
Temperatūra	nuo 0 iki 45 °C temperatūroje (nuo 32 iki 113 °F)	Nuo 10 iki 30 °C (nuo 50 iki 86 °F)
Santykinis drėgnis	Nuo 5 iki 93 %	Nuo 5 iki 93 %
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa

Jeigu transportavimas ir laikymas trunka ilgai, atsižvelkite į toliau nurodytas sąlygas.

	Laikymas	Transportavimas
Temperatūra (rekomenduojama)	Nuo 10 iki 25 °C (nuo 50 iki 77 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Temperatūra (didžiausias diapazonas)	0 – 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Santykinis drėgnis (rekomenduojama)	Nuo 20 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Santykinis drėgnis (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa

Atminkite, kad klausos aparatus reikia įkrauti bent kas 6 mėnesius. Klausos aparatus rekomenduojame įkrauti kas 3 mėnesius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Kitoms dalims, pvz., įkrovikliui, gali būti taikomos kitokios sąlygos.



ĮSPĖJIMAS

Pervežant atsiranda sužeidimo, gaisro arba sprogo pavojaus.

- ▶ Maitinimo elementus ir klausos aparatus pervežkite laikydamiesi vietinių nuostatų.

Informacija apie prietaiso likvidavimą

- ▶ Kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite maitinimo elementų ar klausos aparatų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- ▶ Maitinimo elementus ar klausos aparatus perdirbkite ar likviduokite laikydamiesi vietinių reikalavimų.

Šiame dokumente naudojami simboliai



Nurodoma situacija, kai gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą žalą nuosavybei.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.



CE atitikties žyma, patvirtinanti tam tikrų Europos direktyvų atitiktį, žr. skyrių „Atitikties informacija“.



Nurodo teisėtą prietaiso gamintoją.

Trikčių diagnostika

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
 - Pakeiskite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
 - Pritildykite.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
 - Pakeiskite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Pakeiskite klausos aparatą.
-

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparatą.
 - Pakeiskite klausos aparatą. Taip pat stebėkite įkroviklio būsenos LED diodus.
-

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Su šalimi susijusi informacija

JAV ir Kanada

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

Orion C&G RIC 200

Orion C&G RIC 100

- HVIN: RFM010
- Yra FCC ID: 2AXDT-RFM010
- Yra IC: 26428-RFM010

Orion C&G RIC 75

Orion C&G RIC 50

- HVIN: RFM011
- Yra FCC ID: 2AXDT-RFM011
- Yra IC: 26428-RFM011

Techninė priežiūra ir garantija

Serijos numeriai

Klausos
aparatas

Įmtuvo blokas

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garantija

Įsigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas

 **Teisėtas gamintojas**

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Danija

Document No. 05780-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 210 418 88

Master Rev01, 05.2024

www.wsaud.com

© 08.2024, WSAUD A/S. All rights reserved


0123

www.signia.net